



**Redefiniendo el laboratorio de Coagulación**  
*Impulsados por el compromiso,  
desarrollados por Roche*





## **Redefiniendo el Laboratorio de Coagulación**

*Una nueva era...*

Roche comenzó la experiencia en el área de Hemostasia hace 50 años, con CoaguChek, la línea de instrumentos POC para el monitoreo de pacientes tratados con anticoagulantes orales tradicionales, más utilizada alrededor del mundo.

Roche ha forjado alianzas estratégicas con empresas del área de Coagulación en muchos países en los que mantiene su posición de liderazgo.

Hoy, Roche está desarrollando su propio portafolio para el área de Hemostasia, con un amplio menú de tests, que estarán disponibles globalmente.

El menú propone elevada productividad, reducida complejidad, cumpliendo con los más altos requisitos de calidad, en distintas ofertas que cubren un amplio rango de segmentos del mercado.


Roche suma al portafolio actual, el desarrollo de nuevos productos, con propuestas de eficiencia, con un alto grado de costo-efectividad, orientadas a la calidad, con foco en el cliente y el paciente.

# Pasión por la hemostasia

## Mejorando el cuidado del paciente y la eficiencia diagnóstica

Comprometidos con la innovación y con brindar soluciones costo-eficientes, Roche inicia una nueva era en Hemostasia con soluciones orientadas a la satisfacción del cliente y a la calidad

de vida del paciente. Nuestro portfolio satisface los más altos estándares de calidad, con prestigio global y presencia local, atendiendo a las necesidades de diversos segmentos del mercado.

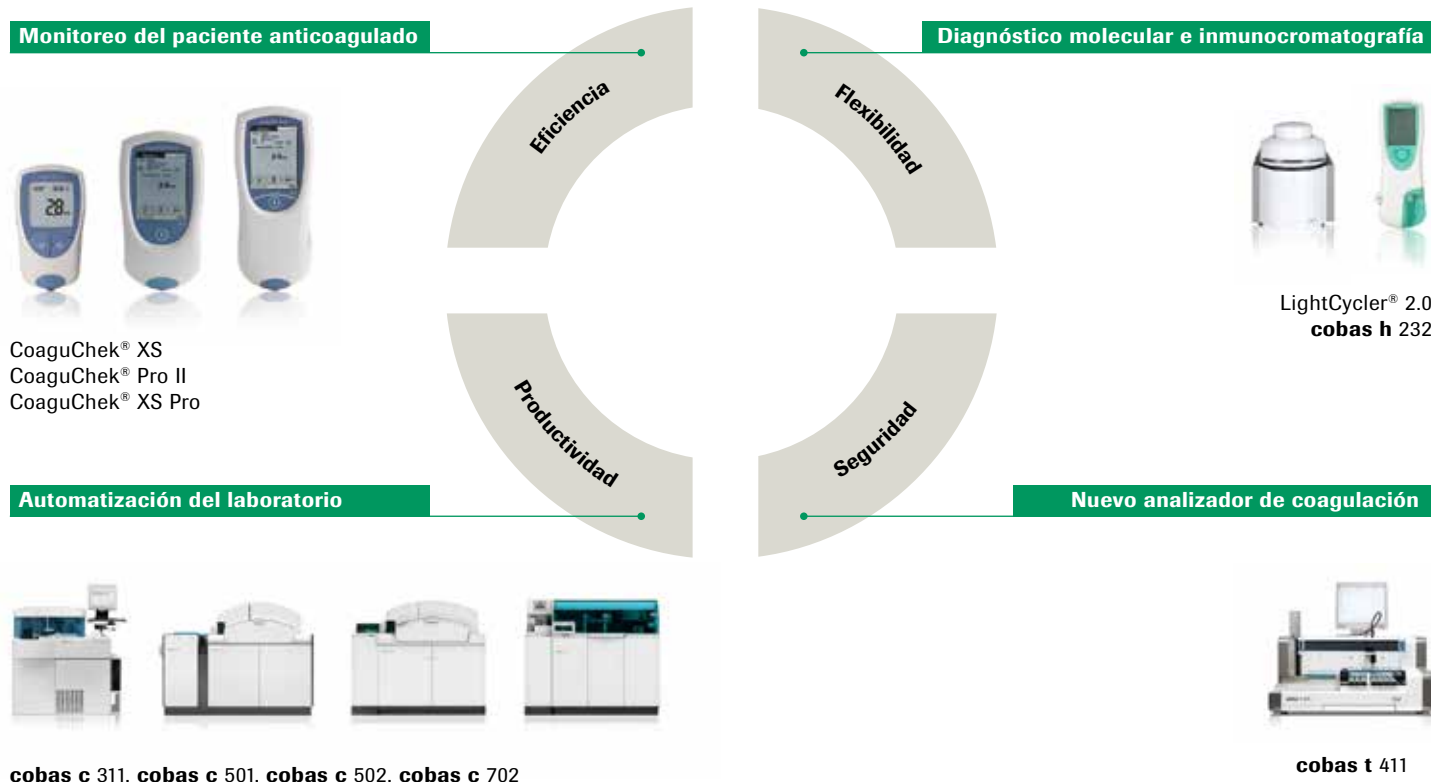

	CoaguChek	cobas h 232	cobas t 411	cobas c	LightCycler 2.0
TP	•*		•		
APTT	•**		•***		
Fibrinógeno			•		
Tiempo de trombina			•		
Antitrombina			•		
Dimero-D		•	•	•	
Factor II					•
Factor V Leiden					•****

\* TP expresado en tiempo, RIN y %  
 \*\* Disponible solo en CoaguChek Pro II  
 \*\*\* Reactivos con tres niveles de sensibilidad  
 \*\*\*\* Mutación G20210A



## **cobas t 411** analizador de hemostasia

### *Seguridad, eficiencia y productividad*

El instrumento **cobas t 411** es el nuevo miembro del portafolio de Roche Diagnóstica. Con su desarrollo, Roche marca el comienzo de una nueva era en el mundo de la coagulación.

Satisfaciendo las necesidades actuales, el analizador **cobas t 411** provee máxima flexibilidad y eficiencia para laboratorios de baja y mediana carga de trabajo.

Posee una excelente capacidad de almacenamiento de reactivos, muestras y cubetas. El instrumento es sencillo de utilizar y requiere una mínima interacción durante la rutina diaria de trabajo.

**cobas t 411** está diseñado con características de seguridad para asegurar resultados robustos y de alta calidad.

Posee la capacidad innovadora de perforado de tapones, maximiza la utilización de reactivos y dispone de un lector de código de barras integrado para cargar datos de muestras y reactivos.

El menú incluye: TP, APTT, Fibrinógeno, Tiempo de Trombina, Antitrombina y Dímero D.

# cobas t 411 analizador de hemostasia

## *Seguridad, confiabilidad y flujo de trabajo dinámico*



### 1 Compartimiento para cubetas:

- 240 cubetas
- 4 racks
- Carga continua

### 2 Área de muestras:

- 100 muestras on board
- Posiciones dedicadas a emergencias
- Carga continua en racks de 5 posiciones

### 3 Perforado de tapones:

- Compatible con diferentes proveedores

### 4 Software:

- Fácil de usar. Sistema Linux
- Programa de QC (incluye gráficos de Levy Jennings)
- Completa trazabilidad
- Protocolos definibles por el usuario

### 5 Compartimiento de reactivos:

- Capacidad para 70 viales
- Carga continua de racks
- Intuitiva indicación del estado con sistema LED
- Menú: rutina, trombofilia, y anti X

### 6 Posiciones de medición:

- 140 tests/hr (PT)
- 100 tests/hr (mix)
- 4 posiciones medición LED a 405 nm y 620 nm
- Principio de medición opto-mecánica
- Ensayos coagulométricos, cromogénicos e inmunoturbidimétricos

# CoaguChek Pro II

*Estableciendo un nuevo estándar en la atención del paciente anticoagulado*



Cuando se trata del manejo de pacientes anticoagulados, la herramienta adecuada puede hacer la diferencia. CoaguChek le permite determinar el RIN de forma fácil, cómoda y segura en tan solo un minuto. Alrededor del mundo se utilizan diariamente 245.000 tiras reactivas

CoaguChek para monitorear a pacientes tratados con anticoagulantes orales. Usted puede brindar a sus pacientes una mejor calidad de vida trabajando en forma simple y segura, incrementando el tiempo de permanencia en rango terapéutico.





# CoaguChek & Conectividad con TAONet

## Conectividad flexible para todas las áreas asistenciales

Ahora con CoaguChek Pro II podrá reducir los errores, mejorar la eficiencia, aumentar la seguridad y optimizar los resultados en el entorno ambulatorio y hospitalario.

### Modelo CoaguChek & TAONet



PAM 8148236001

COBAS, COBAS C, COBAS T, COBAS H, LIFE NEEDS ANSWERS  
y COAGUCHEK son marcas registradas de Roche.

Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus  
respectivos dueños.

©2016 Roche

Productos Roche S.A.Q. e I.  
Rawson 3150  
B1610BAL Ricardo Rojas  
Buenos Aires, Argentina  
[www.cobas.com](http://www.cobas.com)